

Doppler-freie Spektroskopie von Rb

Hannah Bleiner, Valentin Dichtl, Markus Lippitz

14. Juli 2025

Inhaltsverzeichnis

Motivation und Ziele	3
Modellierung in der Physik	3
Rubidium	5
Laserspektroskopie	7
Fabry-Pérot Interferometer	8
Doppler-Verbreiterung	8
Sättigung	9
Dampfdruckkurve und Teilchenzahldichte	10
Sättigungsspektroskopie	10
Balanced Detector	11
Justage optischer Elemente	12
Versuchsaufbau und dessen Justage	13
Programm zur Experimentsteuerung	15
Durchführung des Experiments	16
Testmessung: Doppler-verbreitertes Spektrum	16
Doppler-freies Spektrum	16
Temperaturabhängigkeit des Doppler-verbreitertes Spektrum	17
Arbeitsaufträge	17
Versuchsprotokoll	18
Anhang: Addition von Drehimpulsen	19

Die neueste Version dieser Anleitung befindet sich immer auf [github](#).¹

¹ https://github.com/Lippitz-Lab/Rubidium/raw/main/Anleitung_Rb_dopplerfrei.pdf



Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons](#) "Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International" Lizenz.

Fragen zur Vorbereitung

- 1 Zeichnen Sie ein Diagramm, das die energetische Lage der relevanten Zustände und die erlaubten Übergänge skizziert. Geben Sie dabei sowohl die spektroskopische Bezeichnung als auch die Quantenzahlen an. Beschriften Sie die Linien in Abbildung 4. 6
- 2 Schreiben Sie ein Skript in einer Programmiersprache Ihrer Wahl, das die im Experiment erwarteten Positionen und Abstände der Linien berechnet. Zur Kontrolle: Der Mittelwert aller Linien sollte 3.229 GHz betragen, wenn die niedrigste bei Null liegt (ohne die unten eingeführten Cross-Over-Peaks). 7
- 3 Plotten Sie mittels einer Programmiersprache Ihrer Wahl das erwartete Doppler-verbreiterte Absorptionsspektrum von Rubidium in der natürlichen Isotopenmischung. 9
- 4 Plotten Sie mittels einer Programmiersprache Ihrer Wahl via Gl. 13 das Diodensignal $P(\nu)$, ausgehend vom Doppler-verbreiterten Absorptionsspektrum (Frage 3) und unter der Annahme, dass bei sehr niedriger Laserleistung im Maximum 95% des Lichts in der Gaszelle absorbiert werden. Vergleichen Sie die Form von $P_0 - P(\nu)$ und $\alpha(\nu)$ 10
- 5 Plotten Sie mittels einer Programmiersprache Ihrer Wahl die Teilchenzahldichte ρ von Rubidium als Funktion der Temperatur T im Bereich $10^\circ\text{C} - 70^\circ\text{C}$ 10
- 6 Ergänzen Sie Ihr Skript zu den vorhergesagten Peak-Positionen aus Frage 2 um die cross-over peaks. 11
- 7 Die Maxima der schwarzen Kurve in Abbildung 9 befinden sich bei den relativen Frequenzen -103, -73, -42, -15, +17 und +80 MHz. Um welche Übergänge handelt es sich? 12
- 8 Beschreiben Sie in Ihren Worten die Funktion der drei Strahlen Pumpstrahl, Abfragestrahl und Referenzstrahl. Gehen Sie dabei auch auf die Intensität ein. 15
- 9 Wofür werden im Versuch zwei *polarisierende* Strahlteilerwürfel benötigt? Wozu wird das $\lambda/2$ -Plättchen gebraucht? 15

Doppler-freie Spektroskopie von Rb

Motivation und Ziele

- Dieses Experiment zeigt, wie die Energie der Zustände in Atomen und die Übergänge zwischen ihnen mit Hilfe der Quantenmechanik korrekt beschrieben werden können. Es ist ein Beispiel für quantenmechanische Drehimpulsaddition in Aktion.
- Im Experiment werden Energieabstände zwischen Übergängen in Rubidiumatomen gemessen, die etwa 7 Größenordnungen kleiner sind als die Energie des Übergangs selbst. Dabei macht man sich den Umstand zunutze, dass man nur relative, nicht aber absolute Energien genau messen muss.
- Die zu messenden Energieabstände sind so klein, dass die thermische Bewegung der Atome zu einer Doppler-Verschiebung führt, die alles überdecken würde. Im Experiment verwenden wir eine nichtlineare optische Methode, um nur Atome zu beobachten, die sich relativ zum Laserstrahl nicht bewegen.
- Das Experiment ist ein Beispiel für den iterativen Prozess der Modellierung in der Physik. Sowohl die theoretische Beschreibung des untersuchten Phänomens als auch die Messapparatur und ihre Beschreibung müssen schrittweise verfeinert werden, bis beide übereinstimmen.

Modellierung in der Physik

Der Kern der Physik besteht darin, Modelle zur Beschreibung von Beobachtungen zu entwickeln. Dabei kann man zwischen Modellen des Phänomens, also des physikalischen Systems, und Modellen des Messaufbaus unterscheiden. Beide beruhen auf physikalischen Gesetzen und Konzepten, treffen Annahmen und vereinfachen. Zusammen beschreiben sie das, was bei der Messung passiert. Mithilfe dieser beiden Modelle können wir die Daten mit der Vorhersage vergleichen. Wenn beides übereinstimmt, sind wir fertig. Meist ist das aber nicht auf Anhieb der Fall. Dann müssen wir die Gründe für die Abweichung finden und Verbesserungen einbauen. Dies kann verschiedene Aspekte betreffen: den Messaufbau, das physikalische System, oder deren Modelle. So kann das physikalische System beispielsweise vereinfacht werden, indem ein Pendel näher an eine Punktmasse herangeführt wird. Alternativ kann das Modell angepasst werden, indem das Trägheitsmoment berücksichtigt wird. Auch der Messaufbau kann verbessert werden,

beispielsweise durch Erhöhung der Abtastrate. Ebenso kann das Modell des Messaufbaus angepasst werden, um Aliasing zu berücksichtigen. Dieser iterative Prozess ist in Abbildung 1 dargestellt.

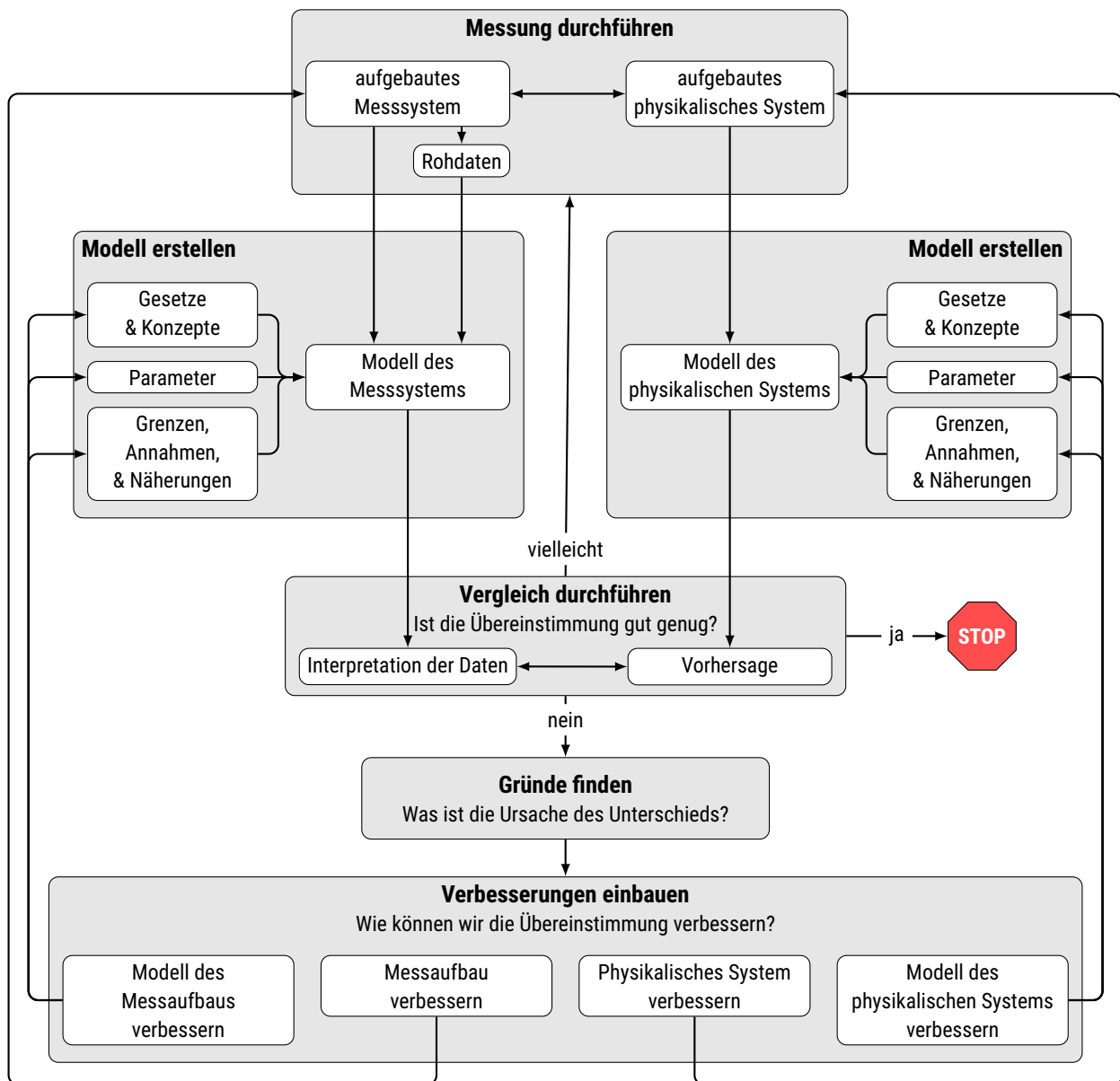


Abbildung 1: Iterativer Prozess der Modellierung in der Physik. Übersetzt aus Dounas-Frazer und Lewandowski, 2018.

In diesem Versuch werden Sie die Hyperfeinstruktur von Rubidium untersuchen, die optischen Übergänge modellieren und die Messung mittels dopplerfreier Spektroskopie durchführen. Sie werden den Prozess so lange iterativ optimieren, bis die Abweichung zwischen Theorie und Experiment weniger als 5 MHz beträgt. Ein Beispiel ist in Abbildung 13 dargestellt. Dazu müssen Sie die Messung sofort auswerten, um zu entscheiden, welche Veränderung Sie vornehmen sollen. Die „Fragen zur Vorbereitung“ zeigen Ihnen die ersten Schritte. Erstellen Sie dabei Auswerte-Skripte in einer Programmiersprache Ihrer Wahl (z. B. Python). Bringen Sie diese lauffähig auf einem Laptop mit, um die Messung sofort auszuwerten. Da Messung und Auswertung verzahnt stattfinden, kann es sein, dass Sie mehr als einen Tag im Labor benötigen. Der Aufbau steht Ihnen die ganze Woche zur Verfügung.

!

Rubidium

Rubidium (Rb) ist ein Alkalimetall und steht im Periodensystem in der ersten Hauptgruppe. Die Elektronenkonfiguration ist $[\text{Kr}]5s^1$. Rubidium hat also ein 'Leuchtelektron' und ist damit sehr ähnlich zu Wasserstoff.

In diesem Experiment untersuchen Sie die Anregung dieses 5s-Elektrons in die p-Schale. Dabei ändert sich die Drehimpulsquantenzahl des Elektrons von $l = 0$ nach $l = 1$. Aufgrund der Spin-Bahn-Kopplung spaltet sich der Zustand $l = 1$ in zwei Zustände auf, die sich in der relativen Orientierung von Elektronenspin und Bahndrehimpuls unterscheiden, was zu einem unterschiedlichen Gesamtdrehimpuls j führt.

Die meisten Atome haben mehr als ein Elektron in der äußeren Schale, so dass man Spin, Bahn- und Gesamtdrehimpuls aller Elektronen addiert und mit den großen Symbolen bezeichnet. Ich benutze S , L und J als Bezeichnung der Quantenzahl und $\mathbf{S}$, $\mathbf{L}$ und $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ als Operator. Diese drei Quantenzahlen und die Hauptquantenzahl $n = 5$ werden im spektroskopischen Symbol der Form $n^{2S+1}L_J$ kodiert. Der Grundzustand ist $5^2S_{1/2}$. Die zwei angeregten Zustände sind $5^2P_{1/2}$ und $5^2P_{3/2}$. Die Übergänge werden als D1- bzw. D2-Linien bei den Wellenlängen 794,98 nm (D1) und 780,24 nm (D2) bezeichnet.

Der Energieunterschied zwischen $5^2P_{1/2}$ und $5^2P_{3/2}$ ist jedoch für den Versuchsaufbau viel zu groß. Wir betrachten nur einen dieser beiden Übergänge, aus technischen Gründen² den höherenergetischen nach $5^2P_{3/2}$, also die D2-Linie. Nun kommt aber der Kernspin $\mathbf{I}$ ins Spiel. Auch der Kernspin ist ein magnetisches Moment, und die Orientierung des Kernspins relativ zu den anderen magnetischen Momenten liefert einen Energiebeitrag, die Hyperfeinstruktur, ganz analog zur oben besprochenen Feinstruktur. Aus der Kopplung mit dem elektronischen Gesamtdrehimpuls $\mathbf{J}$ ergibt sich somit ein Gesamtdrehimpuls $\mathbf{F} = \mathbf{J} + \mathbf{I}$.

Der Kernspin von Rubidium beträgt je nach Isotop $I = 5/2$ (^{85}Rb) oder $I = 3/2$ (^{87}Rb). Somit kann F je nach elektronischem Zustand und Isotop verschiedene Werte annehmen. Für den Grundzustand ^{85}Rb gilt $J = 1/2$ und $I = 5/2$, also $F = 2$ oder $F = 3$ (^{87}Rb : $F = 1$ oder 2). Für den angeregten Zustand der D2-Linie ($5^2P_{3/2}$) kann F jeden der Werte 1, 2, 3 oder 4 annehmen (^{87}Rb : $F = 0$ bis 3). Die Auswahlregeln sind analog zu denen des Gesamtdrehimpulses $\mathbf{J}$, d.h. $\Delta F = 0, \pm 1$.

Die Wechselwirkung des Kernspins mit dem Elektron kann man analog der Spin-Bahn-Kopplung berechnen. Die Dipol-Wechselwirkung liefert

$$\Delta E_{\text{dipol}} = A_{HFS} \mathbf{I} \cdot \mathbf{J} = \frac{h A_{HFS}}{2} K \quad (1)$$

mit A_{HFS} der magnetische Dipol-Konstante der Hyperfeinstruktur und

$$K = F(F + 1) - I(I + 1) - J(J + 1) \quad (2)$$

Falls der Kernspin $I > 1/2$ ist, und gleichzeitig die Ladungsverteilung der Elektronen einen Gradienten am Ort des Kerns liefert, was bei $J > 1/2$ der Fall ist, dann kommt noch eine Quadrupol-Wechselwirkung hinzu:

$$\Delta E_{\text{quadrupol}} = h B_{HFS} \frac{\frac{3}{2} K(K + 1) - 2I(I + 1)J(J + 1)}{4I(2I - 1)J(2J - 1)} \quad (3)$$

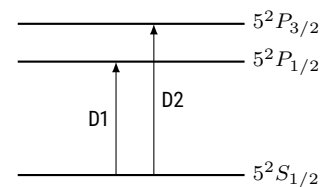


Abbildung 2: D1- und D2-Linie von Rubidium.

² siehe CD Player

6 Doppler-freie Spektroskopie von Rb

Dieser Term ist in der Amplitude kleiner, kann aber im Experiment nicht vernachlässigt werden.

	⁸⁵ Rb	⁸⁷ Rb
ν_{D2}	384 230 406.4 MHz	384 230 484.5 MHz
A_{HFS} für $5^2S_{1/2}$	1 011.9 MHz	3 417.3 MHz
A_{HFS} für $5^2P_{3/2}$	25.0 MHz	84.7 MHz
B_{HFS} für $5^2P_{3/2}$	25.8 MHz	12.5 MHz

Damit haben wir alles, um das quantenmechanisch vorhergesagte Hyperfeinstruktur-Spektrum der D2-Linie von Rubidium zu berechnen. Abbildung 3 zeigt das Ergebnis auf einer absoluten Frequenz- bzw. Wellenlängenachse. Das Verhältnis des kleinsten Frequenzabstandes zur absoluten Frequenz beträgt etwa 10^{-7} . Dies ist die erforderliche Auflösung eines Spektrometers, mit dem sowohl die absoluten Frequenzen / Wellenlängen als auch die Abstände der Übergänge bestimmt werden können. Gute Gitterspektrometer erreichen etwa 10^{-5} oder 0.02 nm. Daher gehen wir in diesem Experiment davon aus, dass die Wellenlänge des Übergangs grob bekannt ist (also ca. 780 nm) und messen nur ein Spektrum mit einer willkürlichen Lage des Frequenznullpunkts. Im folgenden legen wir den Nullpunkt der relativen Frequenzachse auf die minimale Übergangsfrequenz.

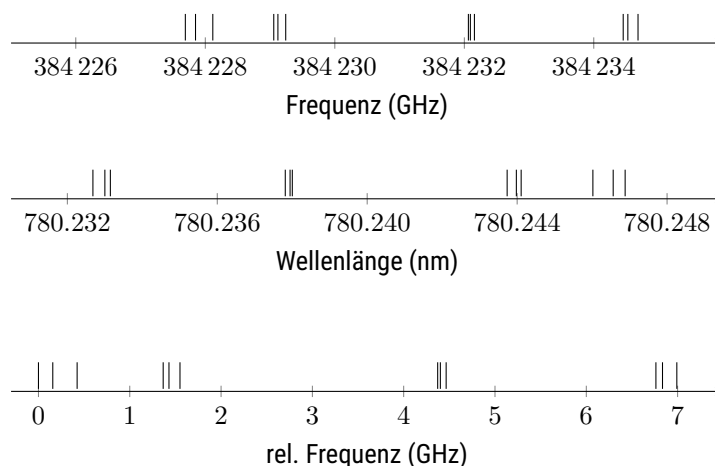


Tabelle 1: Relevante Konstanten zur Berechnung der Übergangsenergien, aus Steck, 2013, 2015

Abbildung 3: Lage der Übergänge auf einer absoluten Frequenz- bzw. Wellenlängenachse.

Abbildung 4: Lage der Übergänge auf einer relativen Frequenzachse.

Zur Vorbereitung Nur sehr selten ist die erste Messung erfolgreich. Sie werden verschiedene Parameter optimieren müssen. Daher ist es notwendig, die Messung sofort soweit auszuwerten, dass der Optimierungsbedarf erkannt werden kann. In den 'Fragen zur Vorbereitung' werden Sie daher schrittweise eine Testmessung auswerten.

Zur Vorbereitung

1. Zeichnen Sie ein Diagramm, das die energetische Lage der relevanten Zustände und die erlaubten Übergänge skizziert. Geben Sie dabei sowohl die spektroskopische Bezeichnung als auch die Quantenzahlen an. Beschriften Sie die Linien in Abbildung 4.
2. Schreiben Sie ein Skript in einer Programmiersprache Ihrer Wahl, das die im Experiment erwarteten Positionen und Abstände der Linien berechnet. Zur Kontrolle:

Der Mittelwert aller Linien sollte 3.229 GHz betragen, wenn die niedrigste bei Null liegt (ohne die unten eingeführten Cross-Over-Peaks).

Laserspektroskopie

Die Kernidee der Laserspektroskopie besteht darin, das Spektrum des Lichts nicht erst nach der Probe in einem Spektrometer möglichst genau zu bestimmen, sondern bereits die Probe mit einem Laser als Lichtquelle mit nur einer einzigen spektral schmalen Linie anzuregen. Die Frequenz dieser Laserlinien wird dann schrittweise verändert und jeweils die Transmission der Probe bestimmt, hier also die Transmission durch ein Rubidiumgas.

Im Experiment verwenden wir einen Halbleiterlaser, ähnlich dem in einem CD-Player. Der Strom fließt durch einen pn-Übergang, in dem Elektronen und Löcher rekombinieren und dabei Licht aussenden, ähnlich wie bei einer Leuchtdiode. Allerdings dient hier das Halbleitersubstrat als Laserresonator, indem zum Beispiel die Endflächen verspiegelt sind. Bei unserem Laser handelt es sich um einen 'External Cavity Diode Laser' (ECDL). Hier ist eine der Endflächen entspiegelt und der benötigte Resonatorspiegel wird durch ein 'volume Bragg grating' gebildet³, das bei 780,2 nm in einem etwa 0,2 nm breiten Spektralbereich besonders gut reflektiert.

In Lasern bilden sich Resonatormoden aus, wenn die Resonatorlänge genau ein ganzzahliges Vielfaches der halben Laserwellenlänge ist, d.h. es bilden sich Knoten auf den Spiegeln. Bei dem hier verwendeten Laser beträgt der Abstand dieser Moden im Frequenzraum etwa 7 GHz. Das spektrale Verstärkungsprofil des Lasers wird insbesondere durch die Reflektivität des Gitters so eingestellt, dass nur eine dieser Moden zu emittieren beginnt. Der Laser ist ein 'single mode' Laser.

Um die Frequenz des Lasers zu ändern, wird die Temperatur des Halbleiterkristalls verändert. Dadurch ändert sich sein Brechungsindex und damit die effektive Länge des Resonators, der Abstand zwischen den Moden wird geringfügig größer und die Lasermode schiebt sich durch das Verstärkungsprofil. Irgendwann erfährt die 7 GHz höhere oder tiefere Mode weniger Verluste. Der Laser springt auf diese Mode und ändert seine Frequenz schlagartig um den Modenabstand. Diese 'mode hops' begrenzen den Frequenzbereich, der einfach abgetastet werden kann. Der Laser ist jedoch so gewählt, dass das Rubidium-Spektrum gerade noch hineinpasst.

Die Temperatur des Halbleiterkristalls kann auf zwei Arten verändert werden: über den Strom, der durch den Kristall fließt, und über ein angebrachtes Peltier-Element. Die Steuerung über den Strom ist viel schneller und einfacher, ändert aber natürlich auch die Ausgangsleistung des Lasers und deckt nur einen relativ kleinen Spektralbereich ab. Das Peltier-Element ist langsamer, deckt aber einen größeren Bereich ab. Im Experiment muss also eine Kombination aus Peltier-Temperatur und Laserstrom gefunden werden, so dass die Laserfrequenz gerade die Peaks des Rubidium-Spektrums überdeckt. Erfahrungswerte können als Startwerte dienen, die konkreten Werte müssen jedoch täglich optimiert werden. Abbildung 5 zeigt, dass die *Wellenlänge* mit dem Strom bzw. der Kontrollspannung steigt. Der Zusammenhang zwischen Kontrollspannung und Wellenlänge bzw. Frequenz ist aber nicht völlig linear. Wir benutzen daher ein Fabry-Pérot Interferometer um regelmäßige

³ nicht wie ein optisches Oberflächengitter, eher wie ein 3D-Kristall

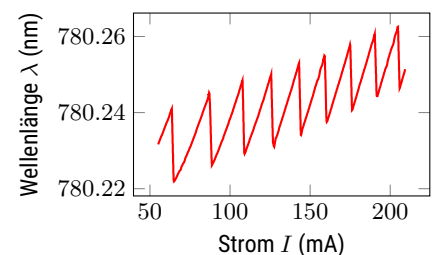


Abbildung 5: Exemplarischer Zusammenhang zwischen Laserwellenlänge und Laserstrom (aus dem Datenblatt des Herstellers).

‘Frequenzmarker’ zu erzeugen.

Fabry-Pérot Interferometer

Wir verstimmen die Frequenz des Lasers mit Hilfe des Stroms oder des Peltier-Elements und messen die Transmission durch das Rubidiumgas. Um daraus ein Spektrum zu erstellen, müssen wir zu jedem Zeitpunkt die Frequenz des Lasers kennen, die in der Nähe von $\nu_0 \approx 384230$ GHz liegt. Ein ‘Wave Meter’ misst optische Frequenzen mit sehr hoher Genauigkeit, ist aber zu teuer und auch nicht notwendig. Relative Frequenzen sind für das Experiment ausreichend.

Wir verwenden ein Fabry-Perot-Interferometer, um regelmäßige Marker auf der Frequenzachse zu erzeugen. Ein Fabry-Perot-Interferometer besteht aus zwei (teildurchlässigen) Spiegeln und entspricht damit einem Laserresonator. Es kommt zu konstruktiver Interferenz, wenn die Länge eines geschlossenen Strahlwegs im Resonators ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge ist. Wird die Frequenz des Lasers variiert, kommt es periodisch zu konstruktiver und destruktiver Interferenz. Der spektrale Abstand wird hier freier Spektralbereich (engl. free spectral range, FSR) genannt und beträgt.

$$\Delta\nu_{FSR} = \frac{c_0}{L} \quad (4)$$

mit der Lichtgeschwindigkeit c_0 und L der Länge des Strahlwegs. Im Experiment verwenden wir einen konfokalen Resonator mit sphärischen Spiegel und gemeinsamen Brennpunkt. Dadurch ist die optische Weglänge im Resonator vier mal der Abstand der Spiegel, so dass sich ein freier Spektralbereich von ca. 300 MHz ergibt. Im Experiment wird parallel zum Transmissionssignal durch das Rubidium-Gas die durch das Fabry-Perot-Interferometer transmittierte Leistung gemessen. Aus der periodischen Änderung dieser Leistung wird dann die relative Frequenzachse durch abschnittsweise lineare Interpolation konstruiert. Dazu ist die Python-Funktion `interp` aus `numpy` sehr hilfreich.

Doppler-Verbreiterung

Im Prinzip hätten wir jetzt alles, was wir brauchen. Aber es gibt noch die Doppler-Verschiebung. Bewegt sich ein Atom mit der Geschwindigkeit v in Strahlrichtung, so ändert sich seine Absorptions-Frequenz aufgrund der Doppler-Verschiebung um $\Delta\nu$.

$$\Delta\nu = \frac{v}{c_0} \nu_0 \quad (5)$$

mit der Ruhe-Frequenz ν_0 . Die Geschwindigkeit kommt aus der Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung $\mathcal{P}(v)$

$$\mathcal{P}(v) = \sqrt{\frac{M}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{Mv^2}{2k_B T}\right) \quad (6)$$

Insgesamt ergibt sich damit eine Gaußförmige Linie der Halbwertsbreite

$$\Delta\nu_{doppler} = \nu_0 \sqrt{\frac{8k_B T \ln 2}{Mc^2}} \quad (7)$$

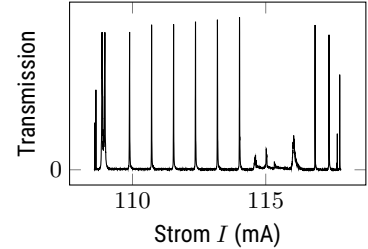


Abbildung 6: Transmission durch das Fabry-Perot-Interferometer. Bei etwa 109 mA und 115 mA sind Modensprünge zu erkennen. Der Abstand der Peaks entspricht dem FSR.

Für Rubidium bei Raumtemperatur beträgt die Doppler-Verbreiterung etwa 500 MHz. Wenn wir einfach die Transmission des Laserstrahls durch das Rubidiumgas bestimmen, werden wir nur vier Peaks von etwa 500 MHz Breite finden, aber die Details der Hyperfeinstruktur nicht auflösen können. Wir müssen also 'Doppler-frei' messen.

Zur Vorbereitung

3. Plotten Sie mittels einer Programmiersprache Ihre Wahl das erwartete Doppler-verbreiterte Absorptionsspektrum von Rubidium in der natürlichen Isotopenmischung.

Sättigung

Bisher haben wir nur die Frequenz des D2-Übergangs in Rubidium betrachtet. Jetzt müssen wir auch die Übergangswahrscheinlichkeit diskutieren. Damit ein Rubidium-Atom ein Photon mit einer Wellenlänge von etwa 780 nm absorbieren kann, muss nicht nur die Wellenlänge genau passen, sondern das Atom muss sich auch im Grundzustand befinden. Dies ist zunächst bei allen Atomen der Fall. Unmittelbar nach der Absorption bleibt das Rubidium-Atom jedoch im angeregten Zustand und fällt nur mit der Rate

$$k_{decay} = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{26.24 \text{ ns}} = 38.1 \text{ MHz} \quad (8)$$

in den Grundzustand zurück. Die Anregungsrate k_{ex} ist proportional zum Absorptionsquerschnitt σ des Atoms bei dieser Wellenlänge und zur Laser-Intensität I

$$k_{ex} = \sigma \frac{I}{h\nu} \quad (9)$$

In die Ratengleichung für den Anteil $0 \leq n \leq 1$ aller Atome im Grundzustand geht die Anregungsrate k_{ex} jedoch nur mit der Differenz $\Delta n = n - (1 - n) = 2n - 1$ der Besetzung im Grundzustand und im angeregten Zustand ein, da die stimulierte Emission der Absorption entgegenwirkt:

$$\frac{dn}{dt} = -k_{ex} \Delta n + k_{decay}(1 - n) = -k_{ex} \Delta n + k_{decay} \frac{1 - \Delta n}{2} \quad (10)$$

Im Gleichgewicht findet wir

$$\Delta n = \frac{k_{decay}}{2k_{ex} + k_{decay}} = \frac{1}{1 + 2k_{ex}\tau} = \frac{1}{1 + I/I_{sat}} \quad (11)$$

mit der Sättigungsintensität I_{sat}

$$I_{sat} = \frac{h\nu}{2\sigma\tau} \quad (12)$$

Für die D2-Linien von Rubidium beträgt $I_{sat} \approx 1 \text{ mW/cm}^2$, wenn die Wellenlänge einem Übergang entspricht. Wenn die Laserintensität I klein ist, dann ist $\Delta n \approx 1 - I/I_{sat}$. Für $I = I_{sat}$ ist $\Delta n = 0.5$, d.h. ein Viertel aller Atome befindet sich im angeregten Zustand ($n = 0.75$). Für sehr große Intensitäten geht Δn gegen Null. Es befinden sich dann gleich viele Atome im Grundzustand wie im angeregten Zustand.

Die Absorption von Rubidiumgas kann durch das Lambert-Beer'sche Gesetz mit dem Absorptionskoeffizienten α beschrieben werden. Die Funktion

$\alpha(\nu)$ nennt man Absorptionsspektrum. Die transmittierte Leistung P nimmt exponentiell mit der Länge L der Probe ab:

$$P = P_0 e^{-\alpha L} \quad \text{beziehungsweise} \quad \alpha = -\frac{1}{L} \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) . \quad (13)$$

Der Absorptionskoeffizienten α ist direkt proportional zum Absorptionsquerschnitt σ :

$$\alpha = \sigma \rho \Delta n \quad (14)$$

mit der Teilchenzahldichte ρ des Gases.

Zur Vorbereitung

4. Plotten Sie mittels einer Programmiersprache Ihrer Wahl via Gl. 13 das Diodensignal $P(\nu)$, ausgehend vom Doppler-verbreiterten Absorptionsspektrum (Frage 3) und unter der Annahme, dass bei sehr niedriger Laserleistung im Maximum 95% des Lichts in der Gaszelle absorbiert werden. Vergleichen Sie die Form von $P_0 - P(\nu)$ und $\alpha(\nu)$.

Dampfdruckkurve und Teilchenzahldichte

Rubidium ist ein Metall mit einem Schmelzpunkt von 39.30° C (312.45 K). In der Gaszelle befindet sich außer Rubidium kein anderes Gas. Die Rubidium-Konzentration im Gas wird durch den Dampfdruck bestimmt. Die Dampfdruckkurve hat die Form

$$p = p_0 e^{-\frac{T_0}{T}} \quad (15)$$

mit den Konstanten p_0 und T_0 aus nebenstehender Tabelle.

Die Teilchenzahldichte ρ ergibt sich aus dem Dampfdruck über das ideale Gasgesetz. Die Teilchenzahldichte steigt also mit der Temperatur steil an.

	p_0 (GPa)	T_0 (K)
fest	7.293	9705
flüssig	2.079	9302

Tabelle 2: Parameter zur Dampfdruckkurve, aus Steck, 2013.

Zur Vorbereitung

5. Plotten Sie mittels einer Programmiersprache Ihrer Wahl die Teilchenzahldichte ρ von Rubidium als Funktion der Temperatur T im Bereich 10° C – 70° C.

Sättigungsspektroskopie

Die Sättigung eines atomaren Übergangs, d.h. die Verringerung des Absorptionskoeffizienten α durch die Verringerung der Besetzungsdifferenz Δn , steht im Mittelpunkt der Sättigungsspektroskopie. Ein Pumpstrahl sättigt die mit ihm wechselwirkenden Atome. Durch den Dopplereffekt sind dies genau die Atome, die eine passende Frequenzverschiebung aufweisen. Sei ω_L die Laserfrequenz und ω_0 die Frequenz des atomaren Übergangs (z.B. $\omega_0 > \omega_L$), dann sind dies genau die Atome mit der Geschwindigkeit $+v$ relativ zum Pumpstrahl, so dass

$$\omega_0 = \omega_L \left(1 - \frac{v}{c_0} \right) . \quad (16)$$

Für diese Atome mit der Geschwindigkeit v ist nun der Absorptionskoeffizient α kleiner. Der entgegengesetzte, schwächere Abfragestrahl hat die gleiche Laserfrequenz. Wegen der entgegengesetzten Ausbreitungsrichtung passen

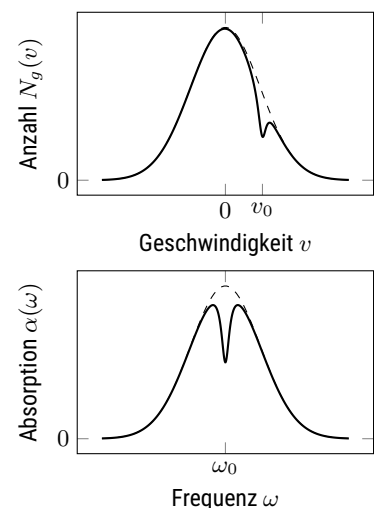


Abbildung 7: oben: Ein Laser der Frequenz $\omega = \omega_0(1 - v_0/c_0)$ brennt ein Loch in die ansonsten Maxwell-förmige Geschwindigkeitsverteilung der Atome im Grundzustand. unten: Dies führt zum Lamb-Dip im Absorptionsspektrum des gegenläufigen Abfrage-Strahls.

hier aber nur die Doppler-verschobenen Atome mit der Geschwindigkeit $-v$ zur Laserfrequenz. Der Abfragestrahl erfährt daher zunächst keine Änderung des Absorptionskoeffizienten.

Liegt die Laserfrequenz jedoch innerhalb der natürlichen Linienbreite des Übergangs, d.h. $\omega_0 \approx \omega_L$, so wechselwirken beide Strahlen mit derselben Atompopulation, d.h. mit Atomen mit $v \approx 0$ (wobei v die Geschwindigkeit entlang des Strahls ist. Senkrecht zum Strahl kann sie immer noch von Null verschieden sein). Variiert man die Frequenz der beiden Strahlen und zeichnet die Transmission des Abfragestrahls auf, so erhält man ein Doppler-verbreitertes Absorptionsprofil, solange die Laserfrequenz noch weit von der Frequenz des Übergangs entfernt ist. Am Übergang selbst entsteht ein *Lamb-Dip* in der Absorption, d.h. eine stärkere Transmission, wenn beide Strahlen mit der gleichen Population wechselwirken. Die Breite des Lamb-Dip ist nur durch die natürliche Linienbreite begrenzt, nicht mehr durch die Doppler-Verbreiterung.

Liegen mehrere atomare Übergänge innerhalb der Doppler-Verbreiterung, so erhält man für jeden Übergang Lamb-Dips in der Absorption. Zusätzlich findet man auch 'cross over dips' genau zwischen zwei atomaren Übergängen mit gemeinsamem Grundzustand. Bei dieser Laserfrequenz ist die Geschwindigkeit $+v$ geeignet, dass der Pumpstrahl einen der Übergänge antreibt und damit den Grundzustand entvölkert. Für den Abfragestrahl haben diese Atome die Geschwindigkeit $-v$, was in diesem Fall gerade dem anderen Übergang entspricht. Da dem Pump-Strahl zwei Übergänge zur Depopulation zur Verfügung stehen, erfährt der Abfragestrahl also auch hier eine reduzierte Absorption. Die cross-over peaks sind in erster Näherung doppelt so stark wie die direkten Übergänge.

Zur Vorbereitung

6. Ergänzen Sie Ihr Skript zu den vorhergesagten Peak-Positionen aus Frage 2 um die cross-over peaks.

Balanced Detector

Ein störender Aspekt des Verstimmens der Laserfrequenz durch den Strom ist die sich ändernde Intensität. Diese kann durch 'balanced detection' eliminiert werden. Ein weiterer Laserstrahl durchläuft das Rubidiumgas parallel zum Abfragestrahl, aber ohne Überlappung mit dem Pumpstrahl. Dieser Referenzstrahl erfährt somit nur die übliche Doppler-Verbreiterung. Ein Detektor mit zwei Photodioden misst die Leistung in beiden Strahlen. Es wird jedoch nur die Differenz der Photoströme durch die beiden Dioden verstärkt. Eine synchrone Änderung oder Fluktuation der Leistung an beiden Dioden wird somit unterdrückt. Das Unterdrückungsverhältnis ('common mode rejection') beträgt etwa 30 dB, also einen Faktor 1000. Damit können kleine Unterschiede zwischen ansonsten sehr ähnlichen Signalen detektiert werden.

Damit dies gut funktioniert, müssen die Leistungen im Abfrage- und Referenzstrahl möglichst gleich sein, wenn der Pumpstrahl noch keinen Unterschied bewirkt. Ein variabler Abschwächer ist hilfreich, um Unterschiede in der Justage zu kompensieren, die an den Monitorausgängen sichtbar

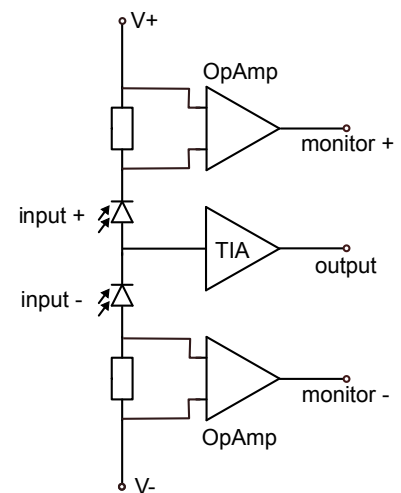


Abbildung 8: Balanced detection. OpAmp: Operationsverstärker. TIA: Transimpedanzverstärker, also Strom-Spannungs-Wandler.

werden.

Zur Vorbereitung

7. Die Maxima der schwarzen Kurve in Abbildung 9 befinden sich bei den relativen Frequenzen -103, -73, -42, -15, +17 und +80 MHz. Um welche Übergänge handelt es sich?

Justage optischer Elemente

Laserstrahl Für unsere Zwecke genügt es, sich ein Bündel von Strahlen vorzustellen, die mehr oder weniger parallel zueinander verlaufen. Der Strahl wird dann durch den Durchmesser des Strahlenbündels und den Divergenzwinkel innerhalb des Strahlenbündels beschrieben. Ohne Linsen können wir vorerst davon ausgehen, dass die Strahlen parallel bleiben, so dass ein Laserstrahl durch einen Strahl der geometrischen Optik angenähert werden kann.

Freiheitsgrade Es ist nützlich, sich die Freiheitsgrade eines Lichtstrahls vor Augen zu halten. In drei Dimensionen benötigen wir zwei Raumkoordinaten x und y und zwei Winkel mit der optischen Achse, also θ_x und θ_y . Wenn wir einen Strahl ausrichten und damit definieren wollen, müssen wir diese vier Freiheitsgrade definieren.

Justierspitze Ein dreidimensionales Volumen über einem optischen Tisch ist ziemlich groß. In den meisten Fällen wird es nicht benötigt. Es genügt, den Strahl auf eine Ebene parallel zur Tischoberfläche zu begrenzen. Die Höhe des Strahls über dem Tisch wird durch die Justierspitze definiert. Der Mittelpunkt der Spitze muss mit dem Mittelpunkt des Strahls übereinstimmen.

Definieren des ersten Schenkels Der Laserstrahl verlässt den Laser normalerweise in einer nicht genau definierten Richtung und Position. Wir benötigen daher zwei Spiegel, um die vier Freiheitsgrade des Strahls zu definieren, da jeder Spiegel durch zwei Winkel beschrieben wird. Wir platzieren die Spitze zunächst hinter dem zweiten Spiegel und benutzen den ersten Spiegel, um den Strahl auf die Spitze zu lenken. Danach platzieren wir die Spitze weit weg vom zweiten Spiegel und benutzen den zweiten Spiegel, um den Strahl auszurichten. Wenn wir diesen Vorgang wiederholen, konvergiert das Verfahren.

Definieren aller weiteren Schenkel Der Vorteil einer festen Strahlhöhe kommt bei allen weiteren Schenkeln des Strahlengangs zum Tragen. Bei einem dritten Spiegel hat der Strahl bereits die richtige Höhe. Wir platzieren den Spiegel so, dass seine Oberfläche auf dem Schnittpunkt der ersten beiden Schenkel liegt. Dann benutzen wir die beiden Winkel des Spiegels, um die neue Richtung des Strahls zu festzulegen.

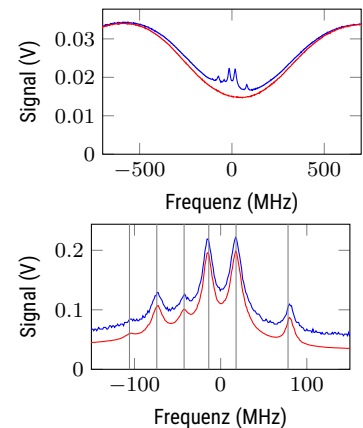


Abbildung 9: oben: Intensität von Abfrage- (blau) und Referenzstrahl (rot). Der Referenzstrahl zeigt nur eine doppler-verbreiterte Linie. Im Abfrage-Strahl sind zusätzlich auch Doppler-freie Linien zu erkennen. unten: Der balanced detector (schwarz) liefert durch die analoge subtraktion ein rauschärmeres Signal als die (vergrößerte) digitale Differenz der beiden obigen Kurven (blau). Grau eingezeichnet sind die erwarteten Linienpositionen.

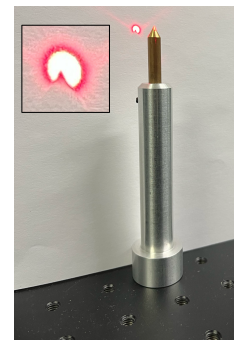


Abbildung 10: Die Justierspitze schneidet bei optimaler Justage ein Viertel des Strahlquerschnitts aus.

Versuchsaufbau und dessen Justage

Machen Sie sich mit dem Versuchsaufbau und dessen Funktionsweise sowie mit den zur Verfügung stehenden Geräten vertraut. Bei allen Versuchsteilen gilt es, aufmerksam und vorsichtig zu arbeiten. Denken Sie dabei auch an die Sicherheit Ihrer Kommilitonen/-innen. Fragen Sie lieber einmal mehr nach, falls Sie sich unsicher sind. Ihr Versuchsleiter wird Ihnen gerne weiter helfen.

Lasersicherheit Sobald ein Bauteil in den Aufbau eingesetzt wird oder mit Schraubendrehern gearbeitet wird, muss der Laserstrahl zumindest vor diesen Bauteilen blockiert werden, um unerwünschte und möglicherweise gefährliche Reflexionen des Laserstrahls zu vermeiden. Aus dem gleichen Grund sollte auch reflektierender Schmuck an den Händen abgelegt werden.

Empfindliche Optiken Berühren Sie die Oberfläche der optischen Elemente nicht oder nur sehr weit entfernt von den Stellen, an denen der Laserstrahl das Element passiert. Die Oberflächen können sehr leicht verschmutzt oder beschädigt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, die Oberflächen mit einem Brillenputztuch oder ähnlichem zu reinigen. Informieren Sie den Versuchsleiter, wenn Sie Verschmutzungen feststellen.

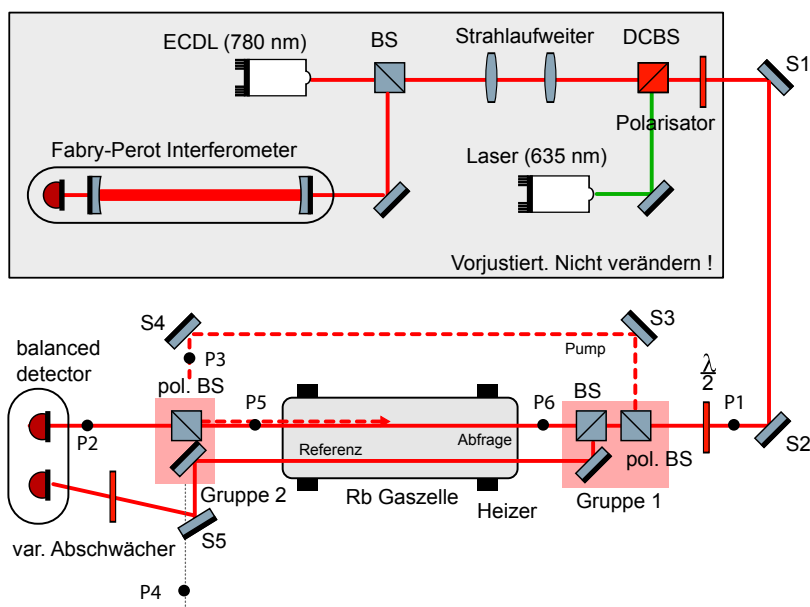


Abbildung 11: Versuchsaufbau. In den Baugruppen 1 und 2 sind die Elemente auf einer gemeinsamen Platte vorjustiert. Spiegel (S), Strahlteiler (BS), Farbteiler (DCBS), polarisierender Strahlteiler (pos. BS), Halbwellenplatte ($\lambda/2$)

Der Versuchsaufbau besteht aus einem vorjustierten Teil, der den Laser und das Fabry-Perot-Interferometer enthält. Dieser darf nicht verändert werden. Insbesondere die Überlagerung des roten Justierlasers mit dem nahinfraroten Messlaser ist aufwendig. Das eigentliche Experiment bauen Sie ausgehend vom Spiegel S1 selbst auf. Dazu wird zunächst nur der rote Justierlaser verwendet. Erst wenn alle Elemente damit justiert sind, schalten Sie den roten Laser aus und den infraroten 780-nm-Laser ein. Vergessen Sie nicht, den roten Justierlaser während der eigentlichen Messung auszuschalten.

Anordnung Es empfiehlt sich, die einzelnen Komponenten zunächst grob an der geplanten Position zu platzieren, um ein Gefühl für die Abstände zu bekommen. Um z.B. Leistungsmessungen durchführen zu können oder die Justierspitze platzieren zu können, ist es sinnvoll, die Optiken nicht zu dicht aneinander zu stellen. Merken Sie sich die Position und nehmen Sie dann alles wieder ab.

Strecke P1–P2 Die beiden Punkte P1 und P2 liegen auf einer Lochreihe und sind möglichst weit voneinander entfernt. Zuerst wird die Strecke P1–P2 mit Hilfe der beiden Spiegel S1 und S2 wie oben beschrieben justiert. Der Strahlengang zwischen S1 und S2 ist unkritisch und muss nicht über die Justierspitze geführt werden.

Wellenplatte und Baugruppe 1 Stellen Sie die Wellenplatte und die Baugruppe 1 so in den Strahl P1–P2 ein, dass die Elemente nach Augenschein mittig und senkrecht getroffen werden. Der abzweigende Pumpstrahl muss erst ab Punkt P3 wieder über einer Lochreihe laufen.

Strecke P3–P4 Justieren Sie den Pumpstrahl auf der Strecke P3–P4 mit den Spiegeln S3 und S4. Auf diese Weise kreuzen sich Pump- und Abfrage-Strahl senkrecht in einem Punkt.

Baugruppe 2, Punkte P5 und P6 Stellen Sie die Baugruppe 2 so auf, dass die reflektierende Innenfläche des Strahlteilers im Schnittpunkt der beiden Strahlen liegt und so der Pumpstrahl möglichst genau entgegengesetzt zum Abfragestrahl läuft. Blockieren Sie den durchlaufenen Abfrage- und Referenzstrahl nach der Baugruppe 1. Justieren Sie den Punkt P5 durch Verschieben der Baugruppen (ein Anschlag als Verschiebekante hilft hier!). Justieren Sie auf den Punkt P6 durch Verdrehen und Verkippen der Baugruppe 2. Iteriert Sie zwischen P5 und P6. Feinheiten lassen sich evtl. besser einstellen, wenn die Spiegel S3 und S4 verwendet werden. Dabei die Spiegel aber nur wenig verstellen, weil deren Position ja eigentlich schon gefunden ist. Dabei mit S3 auf P5 und mit S5 auf P6 optimieren.

Spiegel S5 Stellen Sie den Detektor so auf, dass der Abfrage-Strahl eine der Dioden trifft. Lenken Sie den Referenz-Strahl mit Spiegel S5 auf die andere Diode. Die Position dieses Spiegel ist unkritisch. Ggf. kann auch ein weiterer Spiegel in den Abfrage-Strahl gestellt werden um dessen Justage auf der Diode zu vereinfachen.

Gaszelle Stellen Sie die Rb Gaszelle so in den Strahlengang, dass Referenz- und Abfragestrahl ungestört transmittiert werden.

Elektronik Verbinden Sie den Detektor mit der Datenerfassung (NI-USB 6002 AD-Interface) und den Heizer der Gaszelle mit seinem Netzteil. Schalten Sie den Heizer noch nicht ein.

Infraroter Laser Jetzt sollte alles justiert sein. Schalten Sie den roten Justagelaser aus und den infraroten Laser ein (zuerst den Controller oben links,

Signal	Eingang
Balanced Detector	AI 0
Monitor +	AI 1
50 Ohm Abschluss	AI 2
Monitor -	AI 3
Fabry-Perot-Diode	AI 4
Rückkanal Laser	AI 5

Tabelle 3: Belegung der Datenerfassung

dann links unten 'Laser on/off'). Stellen Sie mit Hilfe der Wellenplatte die Intensität in Pump- und Abfrage-Strahl so ein, dass der Pump-Strahl viel stärker ist als der Abfragestrahl.

Zur Vorbereitung

8. Beschreiben Sie in Ihren Worten die Funktion der drei Strahlen Pumpstrahl, Abfragestrahl und Referenzstrahl. Gehen Sie dabei auch auf die Intensität ein.
9. Wofür werden im Versuch zwei *polarisierende* Strahlteilerwürfel benötigt? Wozu wird das $\lambda/2$ -Plättchen gebraucht?

Programm zur Experimentsteuerung

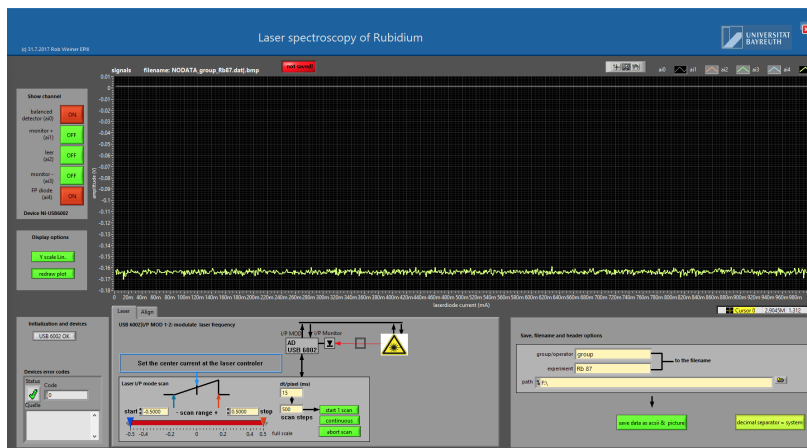


Abbildung 12: Startansicht des Messprogramms.

Starten Sie das Programm 'Rb Spektroskopie' auf dem Messrechner. Oben links können Sie die Signale der Detektoren ein- und ausblenden. Aufgezeichnet und gespeichert wird immer alles. Unten links stellen Sie zwischen zwei Modi um: Messen und Justieren. Im Justier-Modus sehen Sie das Signal der eingblendeten Detektoren als Funktion der Zeit durchlaufen. Nullen Sie die Detektoren, wenn der Laser ausgeschaltet / blockiert und das Raumlicht ausgeschaltet / gedimmt ist. Ändern Sie dann das Raumlicht nicht mehr.

Im Modus 'Messen' wird der Laserwellenlänge variiert. Sie können die Anzahl der Datenpunkte ($< 20\,000$) und die Integrationszeit pro Datenpunkt ($> 15\text{ms}$) einstellen. Die aufgezeichneten Werte werden im großen Diagramm dargestellt und können mit dem Feld rechts unten gespeichert werden. Dabei sollten Sie sinnvolle Dateinamen vergeben. Die Daten werden als ASCII-Datensatz mit allen Kanälen sowie als Bildschirmfoto des angezeigten Graphen gespeichert.

Die Wellenlänge des Lasers wird, wie oben beschrieben, durch Verändern des Laserstroms variiert. Der Laser ist eigentlich dazu ausgelegt, seine Frequenz mit einer externen Elektronik auf eine der Rubidium-Linien zu stabilisieren. Daher verfügt er nur über einen schnellen, aber analogen Modulations-eingang. Eine Spannung beeinflusst den am Controller eingestellten Strom, und dieser die Laserfrequenz.

Im Messprogramm können Sie die Kontrollspannung im Bereich $\pm 5V$ einstellen bzw. verfahren. Die Laserfrequenz ergibt sich aus dem Signal des Fabry-Perot-Interferometers. Sie können davon ausgehen, dass sich die Frequenz zwischen zwei Peaks des Interferometers monoton und linear verändert hat.

Durchführung des Experiments

Ein Experiment gelingt nur in den seltensten Fällen auf Anhieb. Oft zeigt sich erst bei der Auswertung der Daten, ob alles geklappt hat und was man besser anders gemacht hätte. Durchführung und Auswertung sind eng verzahnt. Bringen Sie deshalb ein Laptop mit Ihrer gewohnten Programmierumgebung zum Versuch mit, um die Daten direkt vor Ort auswerten zu können. Die Fragen zur Vorbereitung haben dazu schon die ersten Schritte gelegt. Bringen Sie deshalb auch Ihren Programmcode mit, der die Fragen behandelt. Wenn Sie möchten, können Sie auch den Jupyter-Hub inf4all.uni-bayreuth.de online vom Praktikumsrechner aus benutzen. Gegebenenfalls benötigen Sie auch einen USB-Stick, um die Messwerte vom Praktikumsrechner auf Ihren Laptop zu kopieren.



Testmessung: Doppler-verbreitertes Spektrum

Stellen Sie mit Hilfe der Wellenplatte die Intensität des Pumpstrahls so ein, dass er etwa 95% der maximalen Leistung erhalten.

Die Verstärker der Photodioden und die Analog-Digital-Wandler bewirken einen für jeden Kanal verschiedenen Spannungs-Offset. Diesen können Sie abziehen lassen, indem Sie den Knopf 'zeroing' im Justage-Tab der Software aufrufen. Dabei muss der Laser ausgeschaltet sein und danach sollte sich möglichst die Raumlicht-Situation nicht mehr ändern.

Für das Doppler-behaftete Spektrum reicht es auch, den Referenzstrahl zu betrachten. Lassen Sie sich Referenz-Leistung und Fabry-Perot-Diode anzeigen und scannen Sie die Laserfrequenz über den vollen Bereich. Sie müssen ein Intervall finden, in dem sich die vier Doppler-verbreiterten Peaks des Hyperfeinspektrums im Absorptionssignal finden, und kein Modensprung dazwischen aufgetreten ist. Modensprünge erkennt man an unregelmäßigen Signalen im Fabry-Perot-Interferometer und leichten Sprüngen in der Ausgangsleistung, wie sie die Monitor-Ausgänge des Detektors abbilden. Suchen Sie zunächst nach dem 4-Peak-Spektrum, beseitigen Sie dann die Modensprünge durch Variation der Steuerspannung. Sollte dies nicht gelingen halten Sie Rücksprache mit dem Betreuer.

Doppler-freies Spektrum

Sorgen Sie mit Hilfe eines variablen Abschwächers dafür, dass beide Dioden die gleiche Leistung sehen und so die Differenz Null wird. Das 'Nullen' des Balanced Detectors ist erforderlich, um eine optimale Unterdrückung des gemeinsamen Signals zu erreichen und das Differenzsignal untergrundfrei zu machen.

Nun sollten Sie ein Doppler-freies Spektrum im Differenzsignal finden. Optimieren Sie ggf. die Leistung im Pumpstrahl und auf den Photodioden. Optimieren Sie ggf. vorsichtig (!!) den Überlapp von Pump- und Abfragestrahl durch Spiegel S3 und S4 oder Verkippen von Baugruppe 2.

Achten Sie darauf, dass die einzelnen Monitor-Kanäle nicht sättigen, aber auch ausreichend Leistung vorhanden ist. Wählen Sie einen geeigneten Scanbereich, eine geeignete Integrationszeit und eine geeignete Pixelzahl.

Wenn alle Parameter richtig eingestellt sind, sollte die mittlere Abweichung zwischen der erwarteten und der beobachteten Linienposition nur etwa 1 MHz betragen. Es kann jedoch sein, dass einige Linien nicht oder nur sehr schwach sichtbar sind. Dies ist bei der Zuordnung der Linien zu den Quantenzahlen zu berücksichtigen.

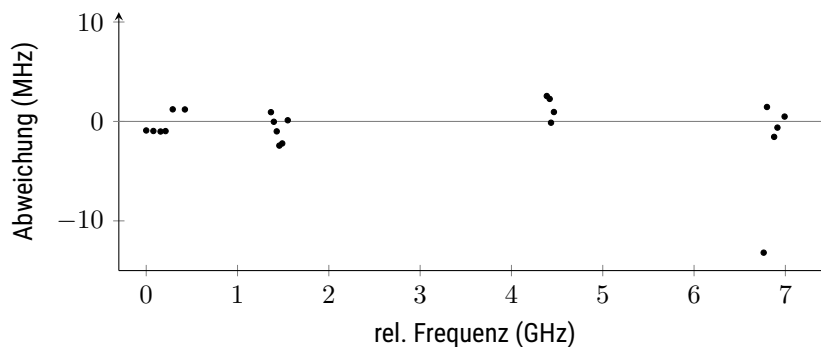


Abbildung 13: Bei optimierter Justage und Durchführung des Experiments gibt es nur eine geringe Abweichung zwischen gemessener und berechneter Linienposition.

Temperaturabhängigkeit des Doppler-verbreitertes Spektrum

Sie können die Temperatur der Rb-Gaszelle durch den Heizer variieren. Berücksichtigen Sie dabei, dass die Teilchenzahldichte exponentiell mit der Temperatur ansteigt (siehe oben bei Dampfdruckkurve). Die angezeigte Temperatur ist die des Heizelements, nicht notwendigerweise die des Gases. Auch ist Aufheizen einfacher und schneller als Abkühlen.

Arbeitsaufträge

- Messen Sie ein Doppler-freies Spektrum der D2-Linien von Rubidium und geben Sie die zugehörigen Übergänge an.
- Bestimmen und diskutieren Sie die Abweichung zwischen den tabellierten und gemessenen Doppler-freien Linienposition.

Optimieren Sie Justage, Messung und Auswertung, bis Sie eine mittlere Abweichung von weniger als 5 MHz erreicht haben.

!

- Messen Sie das Doppler-verbreiterte Absorptionsspektrum bei verschiedenen Temperaturen.
- Bestimmen Sie die Temperaturabhängigkeit der Dopplerverbreiterung und vergleichen Sie diese mit Ihren Erwartungen.
- Bestimmen Sie die Temperaturabhängigkeit der Teilchenzahldichte und vergleichen Sie diese mit Ihren Erwartungen.

- Bonus: Untersuchen Sie den Einfluss der Leistung von Abfrage- und Sättigungsstrahl.
- Bonus: Versuchen Sie, möglichst schmale Linien zu erreichen.
- Bonus: Vergleichen Sie die Amplituden der Linien mit einem passenden Modell.

Versuchsprotokoll

Dokumentieren Sie bitte Ihr Vorgehen und die von Ihnen zur Auswertung verwendeten (Python-)Skripte. Begründen Sie Ihre Entscheidungen. Diskutieren Sie die Ergebnisse, insbesondere wenn sie von Ihren Erwartungen abweichen. Der Anhang sollte alle verwendeten Skripte umfassen. Zitieren Sie die verwendeten Quellen, auch bei Programmcode.

Anhang: Addition von Drehimpulsen

Der ausführliche Titel des Anhangs sollte wohl sein 'Eigenwerte und Eigenfunktionen eines Operators, der die Summe von quantenmechanischen Drehimpulsoperatoren ist'. Dieses Thema findet sich in quasi allen Büchern zur Quantenmechanik. Ich folge hier Nolting, 2006, Kap. 5.4. Mit diesem Formalismus kann man beispielsweise die möglichen Werte der Gesamtspin-Quantenzahl S bestimmen, wenn die Orientierung der Einzel-Spins bekannt ist. Oder man kann in der Atomphysik den Gesamt-Drehimpuls-Quantenzahl J aus der Spin-QZ S und der Bahndrehimpuls-QZ L bestimmen. Ebenso erhält man die Eigenfunktionen eines Singulett- oder Triplett-Zustands.

Der Drehimpuls-Operator

In der Quantenmechanik definiert man einen Drehimpuls-Operator $\hat{L}$, der den Betrag eines Drehimpulses misst, sowie einen Operator $\hat{L}_z$, der eine der drei Vektor-Komponenten misst. Die Eigenwerte sind

$$\hat{L}^2 |l, m\rangle = \hbar^2 l(l+1) |l, m\rangle \quad \text{mit} \quad l = 0, 1, \dots \quad (17)$$

$$\hat{L}_z |l, m\rangle = \hbar m |l, m\rangle \quad \text{mit} \quad m = -l, -l+1, \dots, l \quad (18)$$

Die Quantenzahl m nennt man auch magnetische Quantenzahl (daher das Symbol), weil die z-Achse in Atomen oft durch die Richtung eines externen Magnetfelds vorgegeben ist.

Die Kommutator-Relationen sind so, dass $\hat{L}$ und $\hat{L}_z$ gleichzeitig messbar sind, aber die einzelnen Vektor-Komponenten nicht. Die Unschärfe in den verbleibenden Komponenten beträgt dann

$$\Delta L_x \Delta L_y \geq \frac{\hbar}{2} |\langle \hat{L}_z \rangle| \quad (19)$$

Man kann sich einen Drehimpuls-Vektor in der Quantenmechanik also als einen Vektor der Länge $\hbar\sqrt{l(l+1)}$ vorstellen, dessen z-Komponente $\hbar m$ ist. Glücklicherweise ist der Maximalwert von m , also l , immer kleiner als $\sqrt{l(l+1)}$, und $l+1$ immer größer als das. Die x- und y-Komponenten ist unbekannt, bis auf dass sie gerade die erforderliche Länge des Vektors liefern müssen. Mögliche Werte dieser beiden Komponenten liegen damit auf einem Kreis in der xy-Ebene.

Es gibt nicht nur Vektoren, die einem klassischen Drehimpuls entsprechen, sondern auch anderen Größen, die sich sehr ähnlich einem Drehimpuls verhalten, wie beispielsweise der Spin. Erstere haben immer ganzzahlige Quantenzahlen l, m , letztere können auch halbzahlige sein. Immer ist der Abstand zwischen benachbarten Quantenzahlen aber eins. Ich benutze das Wort Drehimpuls hier immer als Oberbegriff für beides.

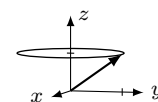


Abbildung 14: Skizze eines Drehimpulsvektors mit unbekannter xy-Komponente.

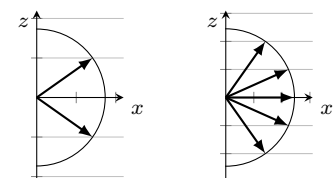


Abbildung 15: Mögliche Orientierung von Drehimpuls-artigen Vektoren mit $l = 1/2$ (links) und $l = 2$ (rechts). Der Abstand der Hilfslinien beträgt $1/2\hbar$ bzw. $1\hbar$.

Addition von Drehimpulsen

Jetzt haben wir zwei Sätze von Drehimpuls-artigen Operatoren, und kennen deren Eigenwerte und Eigenfunktionen, also

$$\hat{L}_1^2 |l_1, m_1\rangle = \hbar^2 l_1(l_1 + 1) |l_1, m_1\rangle \quad \hat{L}_{z,1} |l_1, m_1\rangle = \hbar m_1 |l_1, m_1\rangle \quad (20)$$

$$\hat{L}_2^2 |l_2, m_2\rangle = \hbar^2 l_2(l_2 + 1) |l_2, m_2\rangle \quad \hat{L}_{z,2} |l_2, m_2\rangle = \hbar m_2 |l_2, m_2\rangle \quad (21)$$

Wir können dann Summen-Operatoren bilden

$$\hat{L} = \hat{L}_1 + \hat{L}_2 \quad \text{und} \quad \hat{L}_z = \hat{L}_{z,1} + \hat{L}_{z,2} \quad (22)$$

Diese neuen Operatoren sind glücklicherweise wieder Drehimpuls-Operatoren, folgen also den üblichen Anforderungen der Quantenmechanik an solche Operatoren in Bezug auf die Kommutator-Relationen und die Form der Eigenwerte. Die Frage ist nun, wie man aus bekannten Eigenwerten l_i, m_i und dazugehörigen Eigenfunktionen auf die neuen Eigenwerten l, m der Summen-Operatoren schließen kann, und welche Werte eigentlich gleichzeitig messbar sind.

Man findet, dass die Gesamt-Länge zusammen mit den beiden Einzel-Längen, aber nur mit der Orientierung des Gesamt-Drehimpulses gleichzeitig messbar ist. Gute⁴ Quantenzahlen sind also

$$|l_1, l_2; l, m\rangle \quad (23)$$

⁴ 'Gut' ist in diesem Zusammenhang ein Fachbegriff und bedeutet 'Konstante der Bewegung', also unveränderlich.

Die neue Orientierungs-Quantenzahl m ist gerade die Summe der Einzel-Orientierungs-Quantenzahlen

$$m = m_1 + m_2 \quad (24)$$

Für die neue Gesamt-Länge gilt

$$|l_1 - l_2| \leq l \leq l_1 + l_2 \quad (25)$$

Mehr lässt sich dazu leider nicht sagen. Es ist etwas unbefriedigend, die Summe von zwei Vektoren nicht nennen zu können, obwohl man beide Summanden kennt. Allerdings kennt man die Ausgangs-Vektoren nicht vollständig. Die unbekannte xy-Komponenten sind gerade der Ursprung dieses Spielraums im Wert von l .

Beispiel: $\vec{J} = \vec{S} + \vec{L}$

Was bedeutet es, dass die guten Quantenzahlen $|l_1, l_2; l, m\rangle$ sind? Ich möchte das mit dem Beispiel der Addition von Bahndrehimpuls $\vec{L}$ und Spin $\vec{S}$ zum Gesamtdrehimpuls $\vec{J}$ diskutieren (und passe dabei die Bezeichnungen leicht an). Gute Quantenzahlen sind also $|L, S; J, m_J\rangle$. Die großen Buchstaben sind die Quantenzahlen, die die Länge der Vektoren in der Form $\hbar\sqrt{l(l+1)}$ angeben, m_J ist die magnetische Quantenzahl zu J .

Bei der Kopplung von Spin und Bahndrehimpuls gibt es einen Energiebeitrag des Spins im Magnetfeld der Bahnbewegung. Klassisch würde dieser vom Winkel zwischen den beiden abhängen. Dieser Winkel ist aber nicht die

Quantenzahl, sondern das sich aus $\vec{S}$, $\vec{L}$ und $\vec{J}$ bildende Dreieck wird vollständig durch die Längen der Seiten bestimmt. Das beinhaltet den Winkel zwischen $\vec{S}$ und $\vec{L}$, aber auch deren Amplitude. Gleichzeitig ist nur m_J eine gute Quantenzahl. Bei der Wechselwirkung mit einem äußeren Feld spielt also nur die Orientierung von $\vec{J}$ eine Rolle. Die Spitze von $\vec{J}$ kann wieder auf einem Kreis in der xy-Ebene liegen, solange die Länge von $\vec{J}$ erhalten bleibt. Bei $\vec{S}$ und $\vec{L}$ ist nun aber *nur* die Länge eine gute Quantenzahl, die z-Komponenten nicht mehr. Die Spitze von $\vec{S}$ kann damit auf einem Kreis liegen, dessen Symmetrieachse durch $\vec{J}$ gegeben ist. Alles andere ist unbekannt, kann nicht gleichzeitig gemessen werden. Insbesondere ist die Aufteilung zwischen m_S und m_L nicht fix, nur die Summe, also m_J .

Beispiel: Addition von zwei Vektoren mit Spin 1/2

Als Beispiel wollen wir die beiden kürzesten Drehimpulse addieren, was die Zeichnungen einfacher macht. Dies entspricht der Addition von zwei Elektronen-Spins zu einem Gesamtspin. Der allgemeine Formalismus folgt dann unten. Es sei

$$l_{1,2} = \frac{1}{2} \quad \text{und} \quad m_{1,2} = \pm \frac{1}{2} . \quad (26)$$

Welche Werte können nun die Quantenzahlen l und m der Summe annehmen? Die magnetische Quantenzahl $m = m_1 + m_2$ ist einfach und in nebenstehender Tabelle skizziert.

Falls $m_1 = m_2$, also $|m| = 1$, dann muss auch $l = 1$ sein, da l nie kleiner als m sein kann. Dies sind die Zustände⁵ $|l, m\rangle = |1, -1\rangle$ und $|1, +1\rangle$.

Damit verbleiben noch die beiden Fälle $m_1 = -m_2$, also die Diagonale in der Tabelle. Diese müssen die Zustände $|1, 0\rangle$ und $|0, 0\rangle$ bilden. Die Gesamtzahl der Zustände passt schon einmal. Wie oft in der Quantenmechanik, wenn die Zuordnung nicht einfach entschieden werden kann, werden hier wieder die symmetrische und antisymmetrische Superposition der Ausgangszustände, also der Einträge in der Matrix, gebildet. Welche davon wird $|1, 0\rangle$? Die schon gefundenen Zustände $|1, \pm 1\rangle$ sind symmetrisch bei Vertauschen $1 \leftrightarrow 2$, also wird auch $|1, 0\rangle$ symmetrisch sein, also

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \quad (27)$$

wobei der Pfeil an Position i das Vorzeichen von m_i anzeigt. Damit gibt es einen anti-symmetrischen Zustand mit $l = 0$, und drei symmetrische mit $l = 1$

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \quad (28)$$

$$|1, +1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle \quad (29)$$

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \quad (30)$$

$$|1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle . \quad (31)$$

Die Vorfaktoren, mit denen man die Zustände auf der linken Seite in der Basis der Zustände auf der rechten Seite darstellen kann, nennt man *Clebsch-Gordan-Koeffizienten*.

	$-\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$
$+\frac{1}{2}$	0	1
$-\frac{1}{2}$	-1	0

Abbildung 16: Die möglichen Kombinationen von m_1 und m_2 zu $m = m_1 + m_2$.

⁵ l_1 und l_2 sind nicht angegeben, weil in diesem Abschnitt immer 1/2.

Wie kann man sich vorstellen, dass die Addition von zwei Vektoren gleicher Länge aber unterschiedlicher Orientierungs-Quantenzahl m_i einmal zu einem Vektor der Länge Null und einmal zu einem Vektor der beinahe doppelten Länge führt? Ein Teil der Wahrheit sind die nicht gleichzeitig messbaren anderen Vektor-Komponenten.⁶ Die Spitze beider Vektoren liegt auf einem Kreis. Wenn die Position 'in Phase' ist, dann addieren sie sich zu einem Vektor mit verschwindender z-Komponente und der Länge $\hbar\sqrt{2}$, was in diesem Bild dem Zustand $|1, 0\rangle$ entspricht. Wenn die beiden Ausgangs-Vektoren 'außer Phase' sind, dann addieren sie sich zu Null, ergeben also $|0, 0\rangle$. Bei bekannten, aber unterschiedlichen m_i , also beispielsweise $|\uparrow\downarrow\rangle$ ist also nicht eindeutig, welcher Summenvektor sich ergibt. Die Eigenfunktionen des Summen-Operators $\hat{L}$ sind nur Linearkombinationen aus $|\uparrow\downarrow\rangle$ und $|\downarrow\uparrow\rangle$.

Allgemeiner Fall: Clebsch-Gordan-Koeffizienten

Im allgemeinen Fall der Addition von zwei Drehimpuls-artigen Vektoren mit den Quantenzahlen l_i und m_i bleiben nur die oben schon genannten Regeln

$$m = m_1 + m_2 \quad (32)$$

$$|l_1 - l_2| < l < l_1 + l_2 \quad . \quad (33)$$

Insgesamt sind es $(2l_1 + 1)(2l_2 + 1)$ Eigenfunktionen. Die Parität ist

$$\mathcal{P} = (-1)^{l-l_1-l_2} \quad . \quad (34)$$

Die Clebsch-Gordan-Koeffizienten zur Darstellung der Eigenfunktionen des Summen-Operators in den Eigenfunktionen der beiden Einzel-Drehimpuls-Operatoren kann man sich mit einer Rekursionsregel herleiten. Einfacher ist es aber, diese nachzuschlagen, beispielsweise in Particle Data Group, 2020, bzw. online [hier](#).

Als Beispiel zeigt nebenstehende Abbildung die Koeffizienten für den Fall $l_1 = l_2 = 1$. Die QZ des Gesamt-Drehimpulses sind als J und M bezeichnet. Die Koeffizienten sind, um Platz zu sparen, ohne die Wurzel geschrieben. $-1/3$ ist also als $-\sqrt{1/3}$ zu verstehen, bzw.

$$|J=0, M=0\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|+1, -1\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}}|0, 0\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|-1, +1\rangle \quad . \quad (35)$$

Man muss also immer eine Linearkombination aus allen Möglichkeiten bilden, die das gewünschte $m = m_1 + m_2$ ergeben.

⁶ Ein anderer Teil ist 'so ist die QM eben'.

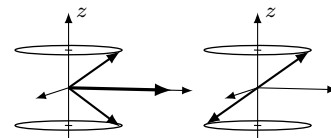


Abbildung 17: Die Addition von zwei Vektoren $|s = 1/2, m_s = 1/2\rangle$ und $|s = 1/2, m_s = -1/2\rangle$ kann sowohl einen Vektor $|S = 1, m_S = 0\rangle$ ergeben (links) als auch $|S = 0, m_S = 0\rangle$ (rechts).

Notation:	J	J	...
	M	M	...
m_1	m_2	Coefficients	
m_1	m_2		
$\vdots$	$\vdots$		
$\vdots$	$\vdots$		

The diagram illustrates the construction of a 6x6 matrix from 1x1, 2x2, and 3x3 blocks. The blocks are arranged in a staircase pattern, with each block containing numerical values. The 1x1 block is a scalar. The 2x2 block contains values for a 2x2 submatrix. The 3x3 block contains values for a 3x3 submatrix. The diagram shows how these blocks are combined to form the full 6x6 matrix.

1x1 block: 1×1

2x2 block: $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ +1 & +1 \end{bmatrix}$

3x3 block: $\begin{bmatrix} +1 & 0 & 1/2 \\ 0 & +1 & 1/2 - 1/2 \end{bmatrix}$

4x4 block: $\begin{bmatrix} +1 & -1 & 1/6 & 1/2 & 1/3 \\ 0 & 0 & 2/3 & 0 & -1/3 \\ -1 & +1 & 1/6 & -1/2 & 1/3 \end{bmatrix}$

5x5 block: $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

6x6 block: $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1/2 & 1/2 \\ -1 & 0 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$

Abbildung 18: Clebsch-Gordan-Koeffizienten für $l_1 = l_2 = 1$. Die QZ des Gesamt-Drehimpulses sind hier als J und M bezeichnet. Aus Particle Data Group, 2020.

Literatur

- Demtröder, Wolfgang (2007). *Laserspektroskopie 1 - Grundlagen*. 5. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag. [↗](#).
- (2010). *Experimentalphysik 3 - Atome, Moleküle und Festkörper*. 4. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag. [↗](#).
 - (2015). *Laser Spectroscopy 2 - Experimental Techniques*. 5. Berlin, Heidelberg: Springer. [↗](#).
 - (2017). *Experimentalphysik 4 - Kern-, Teilchen- und Astrophysik*. 5. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag. [↗](#).
- Dounas-Frazer, Dimitri R und HJ Lewandowski (2018). "The modelling framework for experimental physics: Description, development, and applications". In: *European Journal of Physics* 39.6, S. 064005. [↗](#).
- Hertel, Ingolf Volker und Claus-Peter Schulz (2015). *Atome, Moleküle und optische Physik 1 - Atomphysik und Grundlagen der Spektroskopie*. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag. [↗](#).
- Meschede, Dieter (2008). *Optik, Licht und Laser* -. 3. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag. [↗](#).
- (2015). *Gerthsen Physik*. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag. [↗](#).
- Nolting, Wolfgang (2006). *Grundkurs Theoretische Physik 5/2: Quantenmechanik - Methoden und Anwendungen*. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. [↗](#).
- Particle Data Group (Aug. 2020). "Review of Particle Physics". In: *Progress of Theoretical and Experimental Physics* 2020.8. [↗](#).
- Steck, Daniel Adam (2013). *Rubidium 85 D Line Data*. 2.1.6. University of Oregon: Oregon Center for Optics und Department of Physics. [↗](#).
- (2015). *Rubidium 87 D Line Data*. 2.1.5. University of Oregon: Oregon Center for Optics und Department of Physics. [↗](#).